

2007年9月3日新発売

TEFCO
TECHNICAL FRONTIER CO.

ゲル乾燥時の白濁にお困りではありませんか？



ゲルを乾燥した際に、乾燥し終えたゲルがときどき白く白濁してしまう事はありませんか？

白濁した場合、処理方法はさまざまありますが、どれも時間や手間がかかっていることでしょう。

そこで、

新登場の Clear Dry Solution は白濁の問題に特化して開発された新しいドライソリューションです。

使用法は従来品と同様に使用頂けます。1日から2日間自然乾燥して頂くだけで結構です。

Clear Dry Solution を使えばテクニック不要。いつでも透明でキレイな乾燥結果を手に入れることができます。

Clear Dry Solution

分析方法：電気泳動

使用目的：ポリアクリルアミドゲル乾燥

ゲルマトリックス：ポリアクリルアミド

ゲル形状：スラブゲル

対応乾燥器具：Easy Dry (推奨)

保存温度：室温

セロファンメンブレンとゲルを

Clear Dry Solution に浸します。

自然乾燥タイプの乾燥装置にセットして乾燥させます。


※ ゲル乾燥操作には、Clear Dry Solution の他に乾燥器具とセロファンメンブレンが必要です。

※ ゲルのバックグラウンドの残留色素に対する脱色効果はありません。

～電気泳動の工程～



白濁の様子

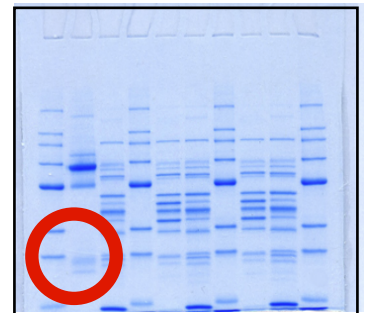

商品番号	商品名	規格	税込価格 (本体価格)
03-145-1	Clear Dry Solution	500ml×1本	¥ 4,725 (¥ 4,500)
03-145-4	Clear Dry Solution	500ml×4本	¥ 13,230 (¥ 12,600)

2007年9月発行

テフコ株式会社

〒192-0361 東京都八王子市越野5-5

TEL 042-676-3513 FAX 042-676-9150

<http://www.tef.co.jp/>